

# GUIDE D'UTILISATEUR IMAGIX INTELECONNECT

À DESTINATION DES  
MÉDECINS RÉFÉRENTS  
ET INFIRMIÈRES.




**Imagix**  
Imagerie médicale

## IMAGIX SPÉCIALISTE DU DIAGNOSTIC



**InteleConnect**  
IntelePACS 4-11-1-P100

 Imagix - Imagerie médicale



Français



Apply for Account

Username

Password



### Pour joindre Imagix

Service à la clientèle: [rx@imagixmedical.com](mailto:rx@imagixmedical.com)  
514 866-6622  
Sans frais : 1 866 916-6622

Aide pour Imagix-InteleConnect : [pacs@imagixmedical.com](mailto:pacs@imagixmedical.com)  
514 866-1809, poste 2878

powered by

 **Intelera**<sup>®</sup>  
Distributed Radiology Solutions<sup>™</sup>

**SIMPLE  
RAPIDE  
CONVIVIAL**




**Imagix**  
Imagerie médicale

## **IMAGIX** SPÉCIALISTE DU DIAGNOSTIC



### **InteleConnect**

IntelePACS 4-11-1-P100

 **Imagix - Imagerie médicale**



Français



Apply for Account

Username

Password



### **Pour joindre Imagix**

Service à la clientèle: [rx@imagixmedical.com](mailto:rx@imagixmedical.com)

514 866-6622

Sans frais : 1 866 916-6622

Aide pour Imagix-InteleConnect : [pacs@imagixmedical.com](mailto:pacs@imagixmedical.com)

514 866-1809, poste 2878

powered by

 **Intelera**<sup>®</sup>  
Distributed Radiology Solutions<sup>™</sup>

# CONNEXION

---



LA CONSULTATION À  
DISTANCE DES EXAMENS  
D'IMAGIX SE FAIT DÉSORMAIS  
PAR UN NOUVEAU SITE  
WEB NOMMÉ **IMAGIX -  
INTELECONNECT<sup>MD</sup>**.

**SIMPLE +  
RAPIDE +  
CONVIVIAL**



ADRESSE DU SITE WEB EST :  
**[HTTPS://RX.IMAGIXMEDICAL.COM](https://rx.imagixmedical.com)**

## **INTELECONNECT<sup>MD</sup> VOUS OFFRE DE NOMBREUX AVANTAGES :**

- > Accès unique à tous les examens d'Imagix;
- > Site web sécurisé;
- > Affichage personnalisé de vos prescriptions;
- > Consultation à partir d'ordinateurs, de tablettes et de téléphones cellulaires;

CETTE MIGRATION DES EXAMENS VERS LA PLATEFORME WEB INTELECONNECT<sup>MD</sup> SE FERA GRADUELLEMENT PAR RADIOLOGIE IMAGIX DE JANVIER À JUIN 2016.

# DIFFÉRENTES SITUATIONS DE CONNEXION POSSIBLE

---

## **01**

J'ai déjà mon identifiant et mon mot de passe pour consulter la radiologie Laënnec Inteleviewer.

## **02**

J'ai mon identifiant Inteleviewer, mais sans mot de passe.

## **03**

Nouvelle demande, si vous avez l'habitude de travailler avec Synapse Viewer.

# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

SI VOUS AVEZ UN  
IDENTIFIANT ET UN MOT  
DE PASSE POUR CON-  
SULTER LA RADIOLOGIE  
LAËNNEC INTELEVIEWER  
1/1

J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC INTELEVIEWER

## 01

Vous rendre à : [https://  
rx.imagixmedical.com](https://rx.imagixmedical.com).

## 02

Saisir votre identifiant  
et mot de passe Intele-  
Viewer. Ils sont encore  
valides.

## 03

Cliquer sur la flèche.

Imagix  
Imagerie médicale

IMAGIX  
SPÉCIALISTE DU DIAGNOSTIC

IntelConnect  
IntelPACS 4-11-1-P100

Apply for Account

Imagix - IntelConnect

Username

Password

01

02

03

powered by  
Intelrad®  
Distributed Radiology Solutions™

# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

SI VOUS AVEZ ENCORE  
UN IDENTIFIANT  
INTELEVIEWER MAIS  
PERDU VOTRE MOT  
DE PASSE 1/2

J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC INTELEVIEWER

## 01

Vous rendre à : <https://rx.imagixmedical.com>.

## 02

Saisir votre identifiant  
et votre mot de passe  
InteleViewer.

## 03

Cliquer sur la flèche.

## 04

Cette fenêtre apparaît.  
Cliquer sur sur « Avez-  
vous oublié votre mot  
de passe? »

The screenshot shows the InteleConnect login interface. At the top left is the InteleConnect logo (a red 3D cube) and the text 'InteleConnect by Intelerad'. Below this, the text 'InteleConnect PACS-4-11-1-R25' is visible. The main content area includes the URL 'rx.imagixmedical.com', a language selector with 'English' selected, and a link 'Demander un nouveau compte'. The login fields are labeled 'Nom d'utilisateur' and 'Mot de passe', with a blue arrow button to the right. A grey error message box at the bottom left contains the text: 'Votre nom d'utilisateur ou mot de passe est incorrect. Veuillez essayer de nouveau. Avez-vous oublié votre mot de passe?'. The Intelerad logo is in the bottom right corner.

# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

SI VOUS AVEZ ENCORE  
UN IDENTIFIANT  
INTELEVIEWER MAIS  
PERDU VOTRE MOT  
DE PASSE 2/2

J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC INTELEVIEWER

**IntelPACS®**

**Mot de passe oublié**

Si vous avez oublié votre mot de passe IntelPACS, vous pouvez utiliser cette page pour le réinitialiser. Entrez votre nom d'utilisateur IntelPACS ou votre adresse de courriel et vous recevrez un courriel avec votre nom d'utilisateur et un lien web spécial valide pour une durée limitée que vous pourrez utiliser pour réinitialiser votre mot de passe.

Nom d'utilisateur ou adresse de courriel

Envoyer le courriel Annuler

05

**05**

Saisir votre identifiant et votre ou mon adresse de courriel.

**06** ✉

Consulter votre boîte courriel dans laquelle vous recevrez un nouveau mot de passe.



# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

NOUVELLE DEMANDE  
SI VOUS AVEZ L'HABITUDE  
DE TRAVAILLER AVEC  
SYNAPSE VIEWER 1/3

NOUVELLE DEMANDE OU  
J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC SYNAPSE

## 01

Vous rendre à : <https://rx.imagixmedical.com>.

## 02

Cliquer sur « Demander un nouveau compte ».

Imagix  
Imagerie médicale

IMAGIX  
SPÉCIALISTE DU DIAGNOSTIC

IntelConnect  
IntelPACS 4-11-1-P100

02  
Apply for Account

Imagix - IntelConnect

Username

Password

powered by  
Intelrad®  
Distributed Radiology Solutions™

# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

NOUVELLE DEMANDE  
SI VOUS AVEZ L'HABITUDE  
DE TRAVAILLER AVEC  
SYNAPSE VIEWER 2/3

NOUVELLE DEMANDE OU  
J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC SYNAPSE

## 03

Remplir les champs obligatoires.

## 04

Cliquer sur « Envoyer la demande ».

## 05

L'administrateur Intele-PACS traitera votre demande d'ouverture dans un délai de **24 à 28 heures ouvrables**.

## 06

Consulter votre boîte courriel dans laquelle vous recevrez vos nouveaux identifiant et mot de passe.



**IntelePACS®**

**Demande de compte**

Ce formulaire ne crée pas un compte automatiquement. Un administrateur IntelePACS vérifiera l'information et communiquera avec vous quand votre compte sera activé.

Nom d'utilisateur \*

Prénom \*

Nom de famille \*

Courriel \*

Téléphone 1 \*

Téléphone 2

Titre / poste

Département

Adresse

Numéro de licence \*

Mot de passe \*

Confirmer le mot de passe \*

\* champ obligatoire

Envoyer la demande Annuler

NUMÉRO DE PRATIQUE À 7 CHIFFRES

# COMMENT SE CONNECTER À INTELECONNECT

NOUVELLE DEMANDE  
SI VOUS AVEZ L'HABITUDE  
DE TRAVAILLER AVEC  
SYNAPSE VIEWER 3/3

NOUVELLE DEMANDE OU  
J'AI L'HABITUDE DE TRAVAILLER  
AVEC SYNAPSE

**07**

Vous rendre : [https://rx-  
.imagixmedical.com](https://rx-imagixmedical.com).

**08**

Saisir votre identifiant  
et votre mot de passe  
InteleConnect.

**09**

Cliquer sur la flèche.

Imagix  
Imagerie médicale

IMAGIX  
SPÉCIALISTE DU DIAGNOSTIC

IntelConnect  
IntelPACS 4-11-1-P100

Apply for Account

Imagix - IntelConnect

Username

Password

08

09

powered by  
Intelrad®  
Distributed Radiology Solutions™

# NOTIFICATION

---



# COMMENT VOIR LES NOTIFICATIONS DANS INTELECONNECT


## 01

À l'ouverture d'InteleConnect, vous arrivez directement sur l'onglet « Notifications »

## 02

Vous choisissez le type de notifications que vous souhaitez voir. 4 types de notifications sont disponibles :

- > Toutes les notifications;
- > Mes notifications;
- > Les notifications critiques;
- > Les notifications critiques en cours.

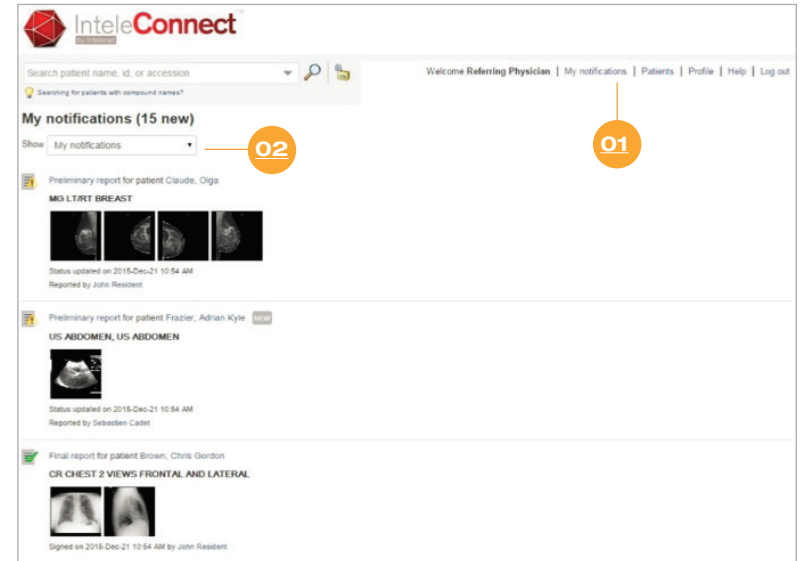


Vous savez en tout temps quel est le statut exact des rapports de vos patients.

Les événements les plus récents apparaissent en haut.

# COMMENT PERSONNALISER LA VUE « NOTIFICATIONS » DANS INTELECONNECT


**01**

Cliquer sur l'onglet « Profile ».

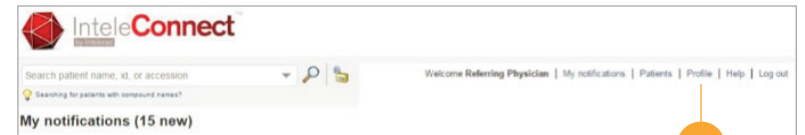

**02**

Cliquer sur l'onglet « Notifications ».

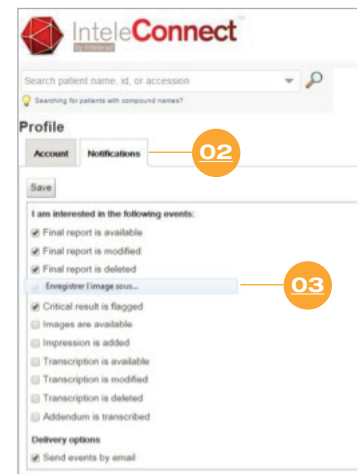

**03**

Vous choisissez dans quelles situations vous souhaitez recevoir des notifications et comment vous voulez qu'elles vous soient envoyées.



Vous pouvez personnaliser la vue « Notifications » selon vos préférences.

**CHERCHER  
LE DOSSIER  
D'UN PATIENT**

---



# COMMENT CHERCHER LE RAPPORT D'UN PATIENT DANS INTELECONNECT

---

1/3



## 01

Saisir les nom et prénom, l'identifiant patient (patient ID) ou le numéro de dossier (visite).

## 02

Cliquer sur la loupe pour rechercher vos patients.

## 03

Ou cliquer sur le cadenas pour rechercher des patients dont vous n'êtes pas pas le médecin référent.



# COMMENT CHERCHER LE RAPPORT D'UN PATIENT DANS INTELECONNECT

2/3

Access Break Glass

This feature allows you to view studies for which you were not granted automatic access.

I understand that I am about to access information for a patient for whom I am not the primary referring physician on record. I acknowledge that I am doing so only for medical reasons and for the sole benefit of the patient, and in doing so am bound to keep this information private and confidential.

Note: This feature allows you to view only studies currently available on the PACS. You do not have access to studies for this patient that are acquired at a later date.

Please allow a few minutes for the studies to become available.

I acknowledge and accept the terms of this confidentiality agreement.

Cancel

**04**

I acknowledge and accept the terms of this confidentiality agreement.

Provide the full patient ID

Or

Provide the full patient name and the date of birth

Last name, first name YYYYMMDD

Check Patient

Cancel

**05**

**06**

## **04**

Si vous n'êtes pas le médecin référent du patient, lire les messages d'avertissement.

## **05**


Accepter les termes de l'accord de confidentialité.

## **06**

Saisir les nom et prénom et la date de naissance ou l'identifiant du patient.

# COMMENT CHERCHER LE RAPPORT D'UN PATIENT DANS INTELECONNECT

3/3

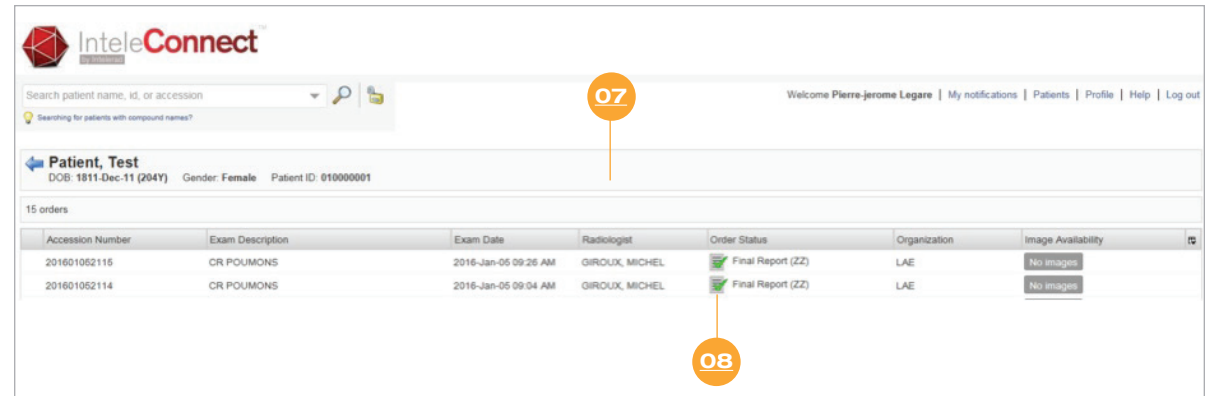

The screenshot displays the IntelConnect web interface. At the top, there is a search bar with the text "Search patient name, id, or accession" and a magnifying glass icon. To the right of the search bar, there is a welcome message: "Welcome Pierre-Jerome Legare | My notifications | Patients | Profile | Help | Log out". Below the search bar, there is a section for "Patient, Test" with the following details: "DOB: 1811-Dec-11 (204Y) Gender: Female Patient ID: 010000001". Below this, there is a table with the heading "15 orders". The table has the following columns: "Accession Number", "Exam Description", "Exam Date", "Radiologist", "Order Status", "Organization", and "Image Availability". The table contains two rows of data:

Accession Number	Exam Description	Exam Date	Radiologist	Order Status	Organization	Image Availability
201601052115	CR POUMONS	2016-Jan-05 09:26 AM	GIROUX, MICHEL	Final Report (ZZ)	LAE	No images
201601052114	CR POUMONS	2016-Jan-05 09:04 AM	GIROUX, MICHEL	Final Report (ZZ)	LAE	No images

Two callout boxes are present: "07" is located above the search bar, and "08" is located below the "Image Availability" column of the table.

**07**

La liste des rapports du patient recherché apparaît.

**08**

Double-cliquer sur le rapport pour l'afficher.

# À QUOI RESSEMBLE LE DOSSIER D'UN PATIENT DANS INTELECONNECT

The screenshot displays the IntelConnect web interface. At the top, the IntelConnect logo is visible. Below it is a search bar with the text "Search patient name, id, or accession" and a search icon. To the right of the search bar, there are navigation links: "Welcome Referring Physician", "My notifications", "Patients", "Profile", "Help", and "Log out".

The main content area shows patient information for "Brown, Chris Gordon" with details: "DCB: 1972-Mar-12 (43Y)", "Gender: Male", and "Patient ID: 10037". There are several action buttons: "View PDF...", "Launch IntelViewer", "Grant Access...", "Add Impression...", and "Edit". A red circle with the number "09" is positioned over the "Launch IntelViewer" button.

Below the patient information, there is a section titled "CR CHEST 2 VIEWS FRONTAL AND LATERAL". It lists the following details:

- Priority: Routine
- Accession Number: 10160
- Referring Physician: Referring Physician
- Organization: Entering Organization
- Status: Final Report (ZZ)
- Study Date: 2004-Oct-12 03:15 PM
- Radiologist: Resident, John (with a "Start a Chat" link)
- Location: AssignedPatient.Location

Below this section is a "Final Report (ZZ)" section with the following text:

CHEST 2 VIEWS FRONTAL AND LATERAL: 1522 HOURS  
INDICATION: Cough.  
FINDINGS: There is an old healed rib fracture on the left. No infiltrates or nodules are seen. The heart size is normal. The hila, mediastinum and pleura are unremarkable.  
IMPRESSION: Negative chest exam.  
Dr. XXXXX 10/12/2004 AddendumRoger

On the right side of the interface, there is a warning message: "Images in IntelConnect are intended for review only and are not appropriate for diagnostic purposes. Please use IntelViewer for diagnostic viewing." Below this message are two chest X-ray images: "CR PA (1 image)" and "CR LAT (1 image)". A red circle with the number "09" is also positioned over the "CR PA" image.

## 09

Vous voyez à l'écran les informations relatives à cet examen, le rapport et son statut, en plus des images de l'examen.



Vous pouvez zoomer sur les images, les voir en format panoramique, ajuster la luminosité et le contraste.  
Vous pouvez voir une copie de la requête.

# VOTRE PROFIL

---



# OÙ MODIFIER LES INFORMATIONS RELATIVES À VOTRE PROFIL?

---

**01**

Cliquer sur l'onglet  
« Profile »

**02**

Cliquer sur l'onglet  
« Account »

**03**

Vous pouvez ajuster  
ou mettre à jour vos  
informations person-  
nelles, en plus de  
modifier votre mot  
de passe.


The image displays two screenshots of the IntelConnect web application interface. The top screenshot shows the main navigation bar with the IntelConnect logo and a search bar. A callout '01' points to the 'Profile' link in the top right corner. The bottom screenshot shows the 'Profile' page with a 'Save' button and a 'Profile' tab. A callout '02' points to the 'Account' sub-tab. A callout '03' points to the 'Required' section of the profile form, which includes fields for Username, First name, Last name, Email address, Secondary email address, Primary telephone, Fax number, Organization, Account Requested by, and Account Created by. Below this is the 'Session Timeout' section with a checkbox and a dropdown menu, and the 'Password' section with a 'Change password' checkbox and input fields for 'Current password' and 'New password'.

**AIDE EN LIGNE**

---



# OÙ ACCÉDER À L'AIDE EN LIGNE?

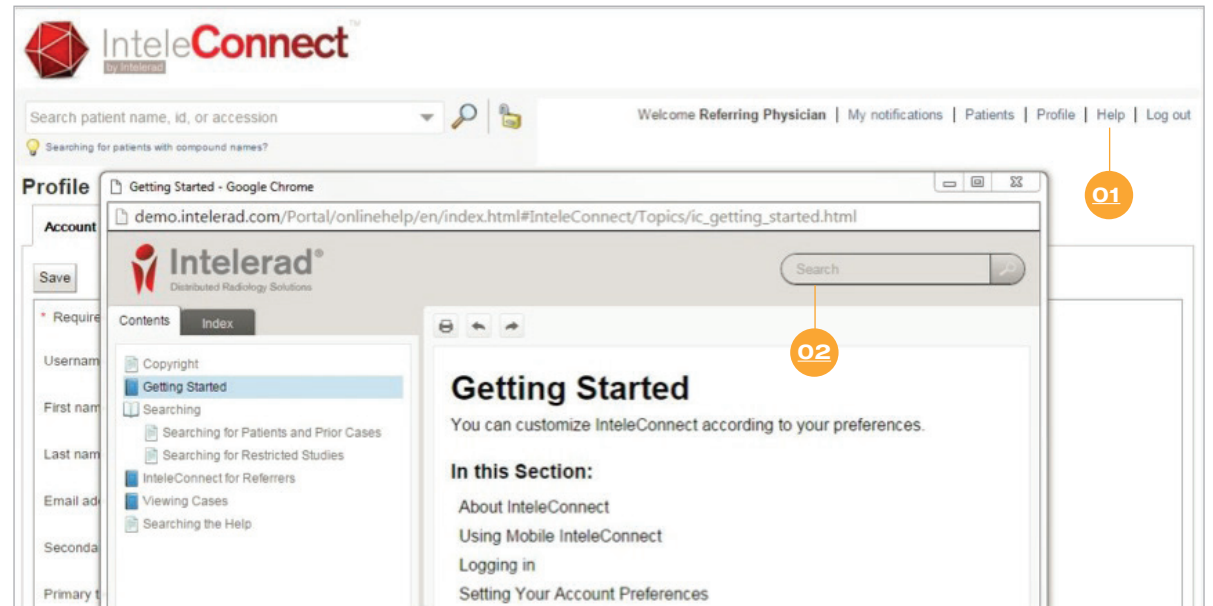

**01**

Cliquer sur l'onglet « Help ».

**02**

Saisir les mots-clés (en anglais)  
pour faire votre recherche.

# PERSONNALI- SATION DE LA LISTE DE PATIENTS

---





# COMMENT PERSONNALISER VOTRE LISTE DE PATIENTS ?

**01**

Cliquer sur l'onglet « Patients ».

**02**

Vous pouvez vous créer des listes de patients en utilisant différents filtres (par exemple : *tous vos patients d'ultrasons référés à la clinique ABC dans les 30 derniers jours ayant un rapport final*).

The screenshot shows the IntelConnect web interface. At the top, there is a search bar with the text "Search patient name, xl, or accession" and a "Searching for patients with compound names?" link. The user is logged in as "Welcome Referring Physician" with links for "My notifications", "Patients", "Profile", "Help", and "Log out". Below the search bar, there is a "My notifications (15 new)" section. The main content area is titled "Edit List Parameters" and contains several filter options:

- List name:** A text input field containing "Patients by location".
- Show in worklist toolbar:** A star icon and a checkbox.
- Date range:** A dropdown menu set to "Last 7 days".
- Exam Status:** An empty text input field.
- Modality:** An empty text input field.
- Patients:** Radio buttons for "All" (selected) and "Only those I referred".
- Discrepancies & critical results:** Checkboxes for "Show only patient orders with"  "Impression discrepancies" and  "Critical results".
- Sorting:** A dropdown menu set to "Most recent".
- Organizations:** An empty text input field.
- Locations:** An empty text input field.

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Save and Apply" and "Cancel".

# CALENDRIER DE DÉPLOIEMENT VERS INTELECONNECT<sup>MD</sup>

---

RADIOLOGIES IMAGIX	DATES DE MIGRATION
Radiologie Saint-Laurent	<b>29 FÉVRIER 2016</b>
Radiologie Montréal-Nord	<b>4 AVRIL 2016</b>
Radiologie Cabrini	
Radiologie Granby	
Radiologie Boucherville	<b>25 AVRIL 2016</b>
Radiologie Brossard	
Radiologie Châteauguay	
Radiologie Blainville	<b>16 MAI 2016</b>
Radiologie Chomedey	
Radiologie Sainte-Thérèse	
Radiologie Saint-Eustache	
Radiologie des Récollets	<b>13 JUIN 2016</b>